

CHI È RO+TEN

RO+TEN da molti anni progetta, sviluppa e realizza dispositivi ortopedici, offrendo una gamma completa di prodotti, riconosciuti di alta efficacia terapeutica.

Continuamente aggiornato sull'evoluzione delle ricerche scientifiche in campo ortopedico ed avvalendosi di un incessante interscambio di informazioni ed esperienze con i medici ed i tecnici ortopedici, lo staff tecnico RO+TEN è costantemente impegnato nella ricerca di soluzioni ergonomiche, tecnologiche e di materiali, per offrire ai pazienti prodotti specialistici d'avanguardia.

La gamma dei prodotti è suddivisa in due linee:

■ ORTHOSELF®

identifica i prodotti ortopedici destinati alle patologie lievi e ai piccoli eventi traumatici, con o senza necessità di prescrizione. Una famiglia di prodotti fruibile da chiunque, in caso di necessità.

■ MEDICALORTHO®

identifica presidi, ortesi e tutori ortopedici, destinati alle patologie più complesse, che necessitano della prescrizione medica e del supporto di un tecnico ortopedico.

GRAZIE PER AVER SCELTO LA QUALITÀ RO+TEN.

L'azienda RO+TEN ha ottenuto la certificazione del suo Sistema di Gestione per la Qualità secondo la normativa ISO 9001 dall'Ente SQS - Associazione Svizzera per Sistemi di Qualità e di Management.



RO+TEN

RO+TEN s.r.l. via Monte Cervino, 50
20043 - Arcore (MI)
tel. +39 039 601 40 94 fax +39 039 601 42 34
www.roplusten.com info@roplusten.com

9DCFG00830ITAO1

cervistable

MEDICALORTHO®

PR0-N1035
Collare cervicale bivalva
con foro tracheale

LEGGERE ATTENTAMENTE E PER INTERO
LE SEGUENTI ISTRUZIONI



È un dispositivo medico efficace che assicura un'ottima immobilizzazione del collo, minimizzando ogni disagio.

La struttura è costituita da due valve rigide rinforzate, da chiudere tramite velcro regolabile, che rendono particolarmente facile l'applicazione, anche in persone distese.

Il materiale atossico e privo di lattice, la forma anatomica che accoglie il mento e poggia dolcemente sullo sterno e i fori d'aerazione, rendono l'ortesi confortevole al massimo. E' presente anteriormente il foro tracheale.

RO+TEN

stare meglio fa bene

CARATTERISTICHE



Struttura costituita da due valve avvolgenti con chiusure a velcro

Struttura in materiale polimerico espanso non citotossico secondo la norma UNI EN ISO 10993-5



Placche rigide di rinforzo centrale anteriore e posteriore

Radiotrasparente e impermeabile

Fori per l'aerazione



Sagomato per una perfetta aderenza al mento, alla nuca e alle spalle

Foro tracheale

Predisposto per essere collegato o allo stabilizzatore toracico o all'iperestensore

MODALITÀ DI UTILIZZO

- 1 *Applicare la valva anteriore con la freccia verso l'alto. Far alloggiare il mento nell'apposita sede (fig.A).*
- 2 *Applicare la valva posteriore con la freccia verso l'alto. Sovrapporre le "alette" laterali in modo che quelle della valva posteriore siano interne e quelle della valva anteriore siano esterne (fig.B).*
- 3 *Fissare ben unite le due valve tramite le chiusure a velcro, stringendo uniformemente da ambo i lati (fig.C).*
- 4 *Se necessario è possibile scaldare e modellare le placche rigide centrali, ritagliando con le forbici eventuali parti eccedenti della struttura in espanso.*

INDICAZIONI

Distorsioni della colonna cervicale da severe a gravi (colpo di frusta)

Discopatie multiple della colonna cervicale

Traumi cervicali

Cedimenti patologici secondari a metastasi cervicali


Utile nel post-operatorio della chirurgia vertebrale

PRECAUZIONI D'USO

Si raccomanda che le pressioni esercitate dal dispositivo non agiscano su parti del corpo che presentano ferite, gonfiori o tumefazioni.

In caso di dubbio sulle modalità di applicazione, rivolgersi ad un tecnico ortopedico.

È consigliabile non utilizzare il dispositivo in vicinanza di fiamme libere.

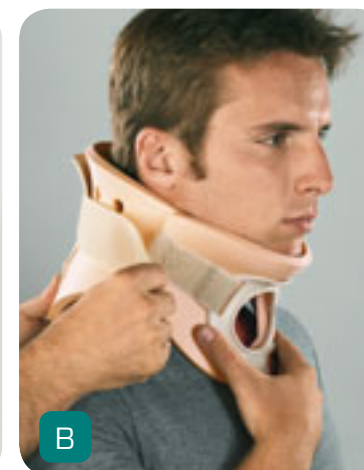

AVVERTENZE

L'ortesi deve essere prescritta e utilizzata sotto controllo medico e applicata da un tecnico ortopedico, che è la figura competente di riferimento sia per l'applicazione sia per informazioni inerenti ad un uso sicuro, in conformità alle esigenze individuali.

Per garantirne l'efficacia, la tollerabilità e il corretto funzionamento è necessario che l'applicazione venga effettuata con la massima cura.

Se ne raccomanda l'utilizzo da parte di un solo paziente.

In soggetti ipersensibili il contatto diretto con la pelle potrebbe causare rossori o irritazioni. In caso di comparsa di dolori, gonfiori, tumefazioni o qualsiasi altra reazione anomala, rivolgersi immediatamente al proprio medico.

MANUTENZIONE

Lavaggio:

- strofinare le parti interne ed esterne con una spugna imbevuta in acqua tiepida e sapone neutro
- lasciare asciugare lontano da fonti di calore.

Non disperdere nell'ambiente il dispositivo né alcuna sua componente.